

MAQUET



DELTACLASSIC 1115
TABLE D'OPÉRATION MOBILE

SURGICAL
WORKPLACES

DELTACLASSIC 1115
TABLE D'OPÉRATION
MOBILE

MAQUET élargit la gamme de ses tables d'opération de la série Classic. La table d'opération Deltaclassic 1115 se concentre sur l'essentiel : les fonctions à commande manuelle sont parfaitement adaptées à la chirurgie générale. Vous cherchez une table d'opération universelle d'un rapport qualité-prix optimal ? En optant pour Deltaclassic, vous faites le bon choix.



Poignées latérales de commande des mouvements de proclive / déclive assistés par ressorts à gaz.

Position semi-assise, pour l'opération de la thyroïde ou l'ablation des amygdales, par exemple



Néphrectomie en décubitus latéral



Chirurgie générale –
par exemple cholécystectomie



Positionnements à plat pour
l'orthopédie ou la chirurgie
vasculaire



Gynécologie



DELTA CLASSIC 1115
TABLE D'OPÉRATION
MOBILE

delta classic 1115
Table d'opération mobile

pour la chirurgie générale avec plateau en 5 parties (tête et plaques jambières à commander séparément). Cadre du plateau et carénage du pilier entièrement en acier au chrome-nickel. Pied de table de conception solide et stable avec carénage en acier au chrome-nickel. Quatre roulettes de 100 mm procurent une grande maniabilité de la table d'opération. Blocage de la table par verrouillage des roulettes au moyen d'une pédale centrale.

Réglage de la hauteur par système hydraulique à pédale. Réglage des fonctions proclive / déclive et du dossier vers le haut / le bas par leviers assistés par ressorts à gaz sous le dossier, côté tête. Réglage de l'inclinaison latérale par manivelle par le côté gauche ou droit au niveau de la plaque de siège. La manivelle est rabattable et amovible. Réglage des plaques jambières vers le haut / le bas assisté par ressorts à gaz ; écartement des plaques jambières par articulation crantée. Réglage de la tête vers le haut / le bas par vis à poignée.

Variantes :

delta classic 1115.01B0

Table d'opération comme ci-dessus, y compris jeu de matelas SFC, à fixation Velcro, radiotransparents et conducteurs

delta classic 1115.01C0

Table d'opération comme ci-dessus ; dossier avec billot intégré ; y compris jeu de matelas SFC, à fixation Velcro, radiotransparents et conducteurs

Equipement de base requis :

1115.50B0 Plaques jambières

Réglage vers le haut / le bas assisté par ressorts à gaz, matelas SFC compris

1115.64B0 Tête

Réglage vers le haut / le bas par vis à poignée, matelas SFC compris

Accessoires recommandés / en option :

1115.58B0 Plaque jambière

non divisée ; réglage vers le haut / le bas assisté par ressort à gaz, matelas SFC compris

1001.65A0 Porte-jambes de Goepel (commander 2 unités)
1003.23C0 Clameau de serrage radial (commander 2 unités)

1002.57A0 Arc d'anesthésie sans clameau

1003.23C0 Clameau de serrage radial

1001.6000 Appui-bras

réglage en hauteur et latéral, matelas SFC

1115.45A0 Cuvette

en acier au chrome-nickel

1115.60A0 Pièce intermédiaire pour tête

1115.46A0 Passe-cassettes

SFC – Special foam core/noyau mousse spéciale

Autres accessoires : Voir le catalogue MAQUET 1000 – Accessoires pour tables d'opération.



Billot en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur sans tête :	1745 mm
Longueur avec tête :	2025 mm
Largeur :	540 mm
Largeur hors tout :	605 mm
Hauteur avec matelas :	780 - 1030 mm
Proclive / déclive :	30°/30°
Inclinaison gauche / droite :	20°/20°
Dossier vers le haut / vers le bas :	70°/40°
Plaques jambières vers le haut / vers le bas :	25°/90°
Plaques jambières écartables et amovibles.	
Poids :	156 kg
Poids maxi. du patient :	135 kg

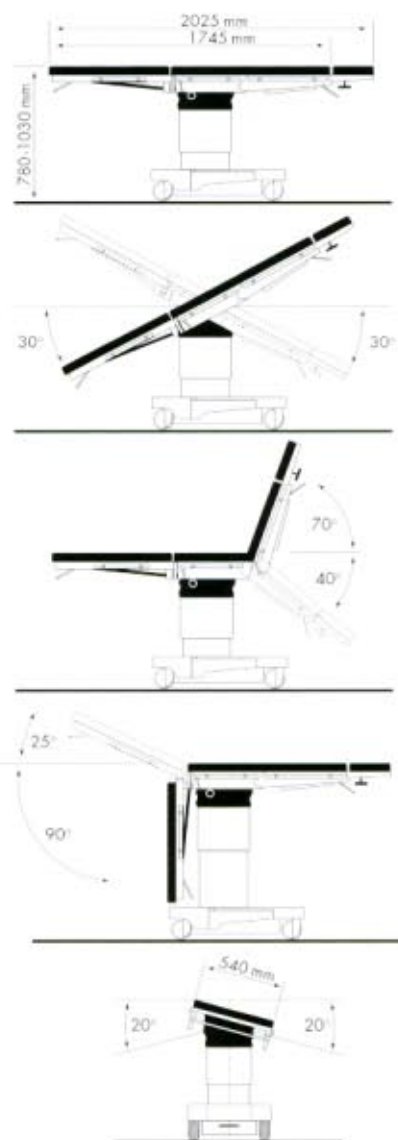


Illustration :	
Deltaclassic	1115.01 B0
Tête	1115.64 B0
Plaque jambière	1115.58 B0
Appui-bras	1001.60 00
Arc d'anesthésie	1002.57 A0

**FRANCE**

MAQUET
38, rue Marbeuf
75008 Paris

Téléphone 01/56 69/1070
Télécopie 01/56 69/1071
Hotline S.A.V. 08/10 37 97 02
e-mail maquet@wanadoo.fr

SUISSE

MAQUET AG
Rütihofstr. 1
9052 Niederteufen

Téléphone 071/333 26 22
Télécopie 071/333 26 03
e-mail maquet.info@bluewin.ch

BELGIQUE

MAQUET
Rue de Bruxelles 182-184
1702 Groot-Bijgaarden

Téléphone 02/467 85 85
Télécopie 02/463 32 88
e-mail maquet@maquet.be

MAQUET Aktiengesellschaft
Surgical Workplaces
Kehler Straße 31
76437 Rastatt/Germany

Téléphone +49/72 22/932-0
Télécopie +49/72 22/932-571
Hotline S.A.V. +49/72 22/932-745
e-mail info.op-tische@maquet.de
Internet www.maquet.com

MAQUET

Sous réserve de modifications dues au développement technique.